


Quickstart Guide
 QuickTalker™ 7
 QuickTalker™ 12
 QuickTalker™ 23



www.ablenetinc.com


Key Features

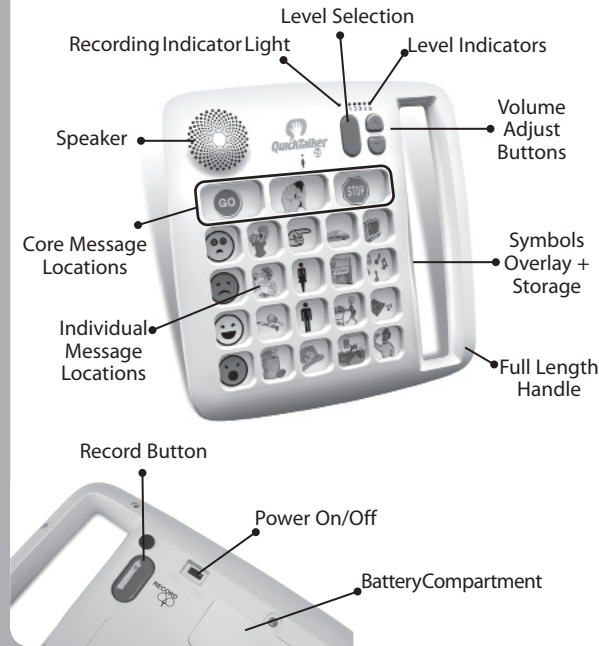

Step 1 - Powering QuickTalker™

Powering QuickTalker™


Turn the device to the back side. Insert 4 AA batteries into the device where shown. Use the On/Off switch to power the device.

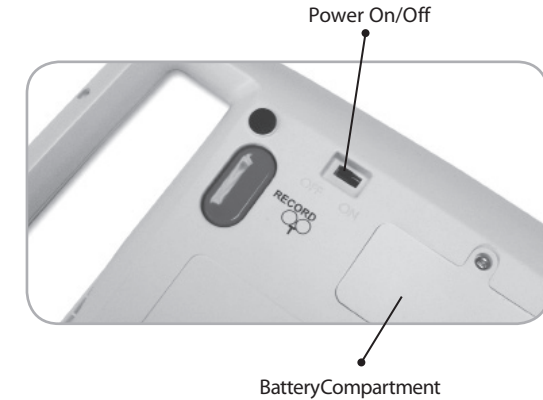

Step 2 - Select Level

Select Level


Select LEVEL (1-5) by pressing the red button on the front of the device.

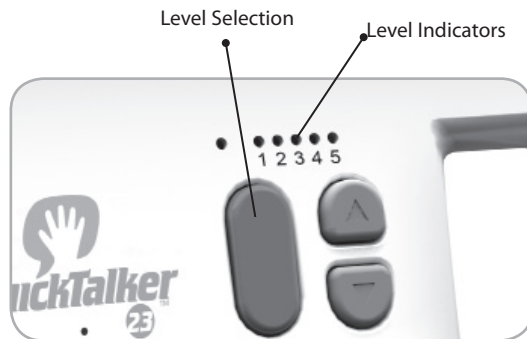

Step 3 - Recording Messages

a) Entering Record Mode

Press and hold the RECORD button on the back of device until the red light is on, then release.

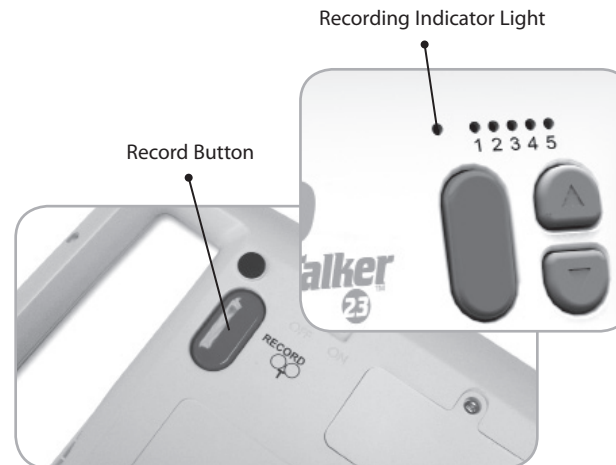

b) Recording Messages

Press and hold the desired message location, begin speaking after the beep, then release. Repeat for other locations.

Tip! *Speak 6-8" from the microphone for loud, clear sound.*



c) Exiting Record Mode

Press and release the RECORD button. Lights turn off. Note: The device will automatically exit Record Mode after 20 seconds of no activity.

Step 4 - Playing a Message

Playing a Message


Press the desired location to play a message.



Note: Pressing another location will stop the current message.

Adjusting Volume

Press the gray arrow buttons to adjust the volume.

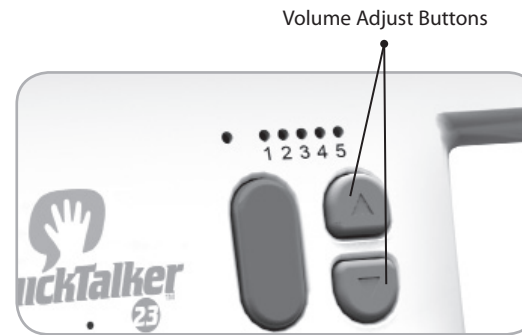

Message and light function

When a location is pressed the record light will flash yellow if the location is blank; red if recorded.

Warranty and Care

Cleaning and Care

To clean wipe with a slightly damp cloth.

Warranty

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text is available at www.ablenetinc.com.

More Information

You can find warranty, guarantee and return/repair information online.

For more information on AbleNet products and services, or for contact:

AbleNet, Inc.

Mpls./Saint Paul, MN 55113

800-322-0956

www.ablenetinc.com

Erasing Messages

Single Location - Enter Record Mode, then quickly press and release the location.

Level - Press and hold RECORD button for 10 seconds and all messages on current level will be cleared. Core messages will remain.

Master Clear - Press and hold RECORD button for 30 seconds and ALL QuickTalker messages will be cleared.

Record Button



Advanced Features

Core messages

The three core messages will be the same for all levels. The last recorded messages will be played.

Locking the Controls (RECORD & LEVEL)

Press and hold the red RECORD and LEVEL buttons simultaneously for 5 seconds. All lights will flash twice. Repeat to unlock controls.

Record Button




Level Indicators




Guide de mise en route rapide

QuickTalker™ 7
QuickTalker™ 12
QuickTalker™ 23

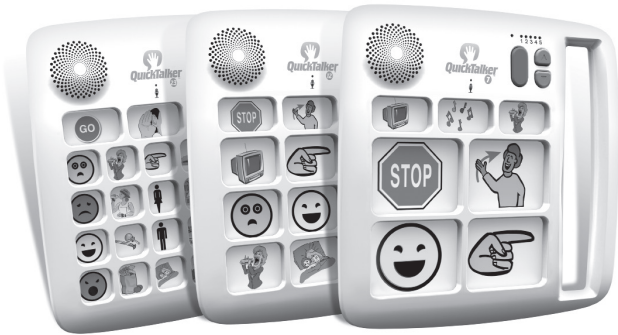

www.ablenetinc.com


Caractéristiques

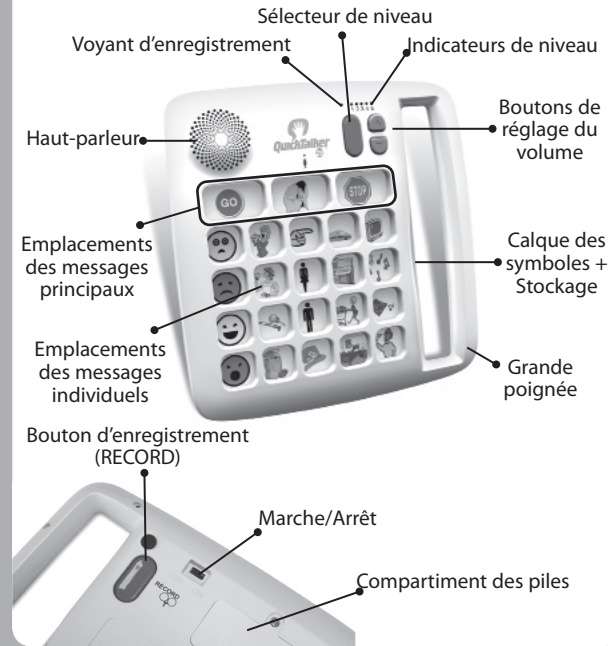

Étape 1 – Mise sous tension du QuickTalker™

Mise sous tension du QuickTalker™


Retournez l'appareil. Insérez quatre piles AA dans l'appareil comme illustré. Utilisez le contacteur Marche/Arrêt pour mettre l'appareil sous tension.

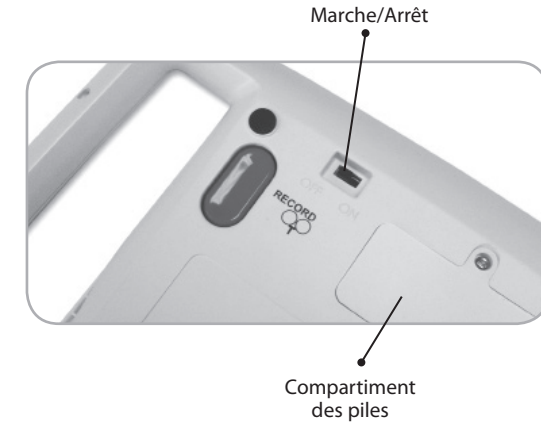

Étape 2 – Sélection d'un niveau

Sélection d'un niveau


Sélectionnez un NIVEAU entre 1 et 5 en appuyant sur le bouton rouge sur l'avant de l'appareil.

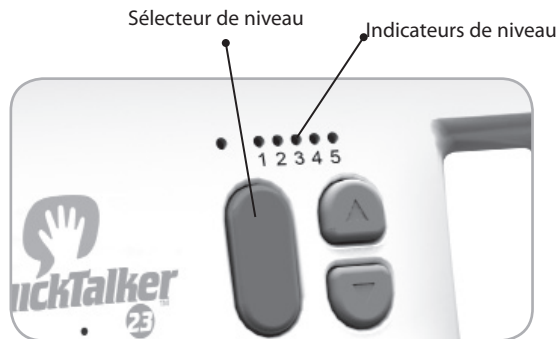

Étape 3 – Enregistrement de messages

a) Activation du mode d'enregistrement

Appuyez sur le bouton RECORD à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume, puis relâchez.

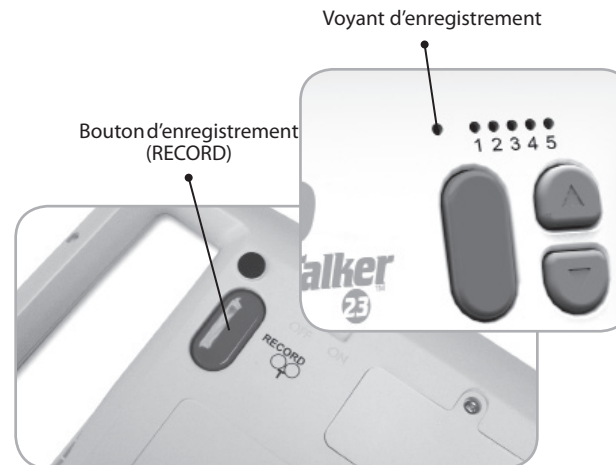

b) Enregistrement de messages

Appuyez sans relâcher sur l'emplacement du message souhaité, commencez à parler après le bip, puis relâchez. Reprenez la procédure pour les autres emplacements. Astuce ! Parlez à 15-20 cm du microphone pour un son clair et fort.



c) Désactivation du mode d'enregistrement

Appuyez sur le bouton RECORD, puis relâchez. Les voyants s'éteignent. Remarque : L'appareil désactive automatiquement le mode Enregistrement après 20 secondes d'inactivité.

Étape 4 – Lecture d'un message

Lecture d'un message

Appuyez sur l'emplacement souhaité pour écouter un message.




Remarque : Une pression sur un autre emplacement arrêtera la lecture du message en cours.

Réglage du volume

Appuyez sur les boutons fléchés gris pour ajuster le volume.

Boutons de réglage du volume

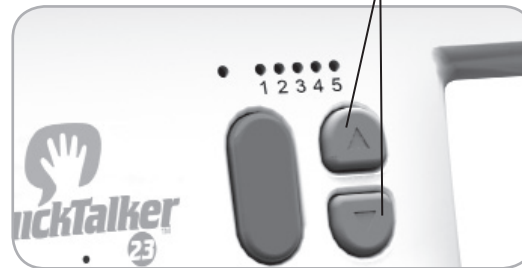

Message et voyant

Quand vous appuyez sur un emplacement, le voyant RECORD clignote en orange si l'emplacement est vide ; en rouge s'il correspond à un enregistrement.

Effacement de messages

Un emplacement – Activez le mode Enregistrement, appuyez brièvement sur l'emplacement, puis relâchez.

Niveau – Appuyez sur le bouton RECORD pendant 10 secondes pour effacer tous les messages au niveau actuel. Les messages principaux ne seront pas effacés.

Effacement général – Appuyez sur le bouton RECORD pendant 30 secondes pour effacer TOUS les messages du QuickTalker.

Bouton d'enregistrement (RECORD)



Fonctions avancées

Messages principaux

Les trois messages principaux seront les mêmes à tous les niveaux. Les derniers messages enregistrés seront lus.

Verrouillage des commandes RECORD et LEVEL (enregistrement et niveau)

Appuyez simultanément sur les boutons RECORD et LEVEL rouges pendant 5 secondes. Tous les voyants clignotent deux fois. Reprenez la procédure pour déverrouiller les commandes.

Bouton d'enregistrement (RECORD)

Indicateurs de niveau



Garantie et entretien

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer, passez sur les surfaces un chiffon légèrement humide.

Garantie

Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie complète se trouve sur www.ablenetinc.com.

Informations complémentaires

Vous pourrez lire la garantie et les informations de retour/réparation en ligne.

Pour de plus amples renseignements sur les produits et services d'AbleNet, contactez :

AbleNet, Inc.

Mpls./Saint Paul, MN 55113

800-322-0956

www.ablenetinc.com




Kurzanleitung
QuickTalker™ 7
QuickTalker™ 12
QuickTalker™ 23




www.ablenetinc.com

Produktmerkmale

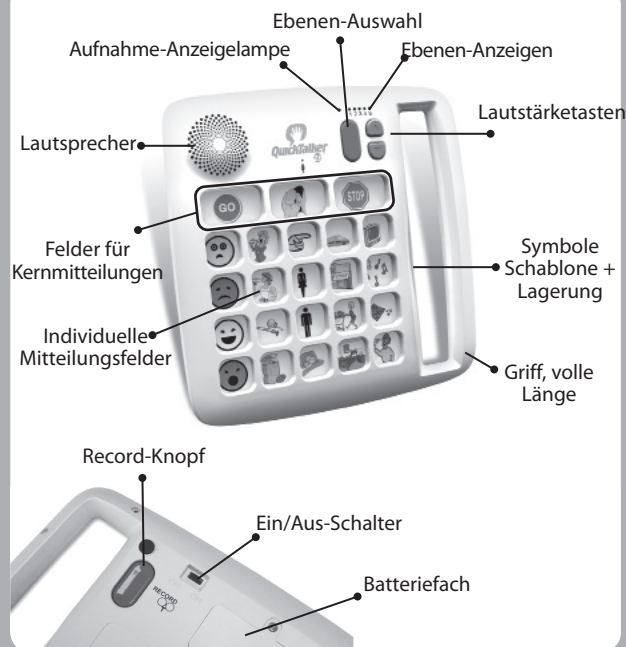


Schritt 1 – Einschalten des QuickTalker™

QuickTalker™ einschalten
Das Gerät umdrehen. In das Gerät vier AA-Batterien (Mignonzellen) einlegen. Beziehen Sie sich dabei auf die Abbildung. Den Ein/Aus-Schalter betätigen, um das Gerät einzuschalten.

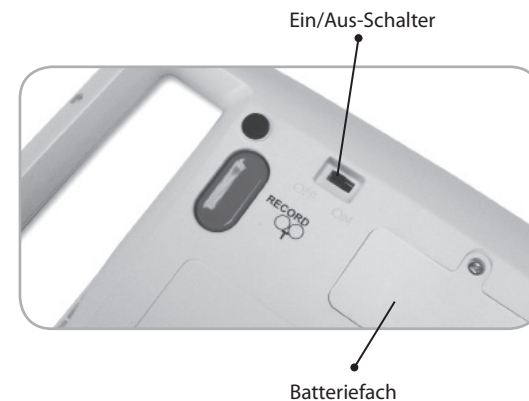


Schritt 2 – Wahl der Ebene

Ebene auswählen
Den roten Knopf an der Vorderseite des Geräts drücken, um die EBENE (1-5) zu wählen.

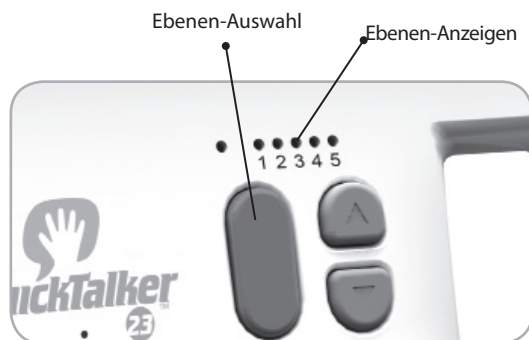

Schritt 3 – Aufnehmen von Sprachmitteilungen

a) In den Aufnahme-Modus umschalten
Den RECORD-Knopf an der Rückseite des Geräts gedrückt halten, bis die rote Lampe leuchtet. Dann loslassen.

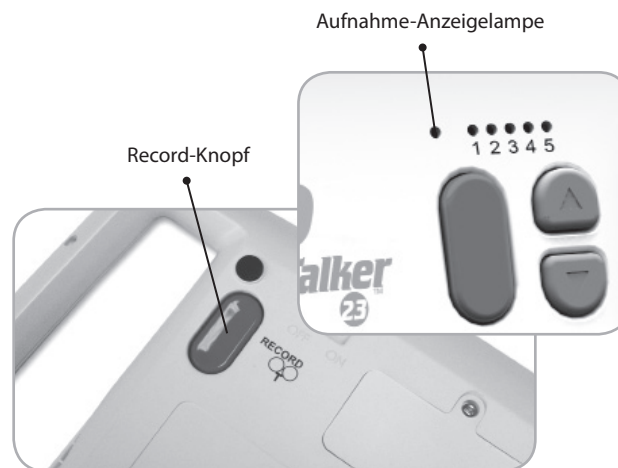

b) Die Sprachmitteilungen aufzeichnen
Das Feld für die gewünschte Mitteilung gedrückt halten und nach dem Tonsignal zu sprechen beginnen. Dann loslassen. Den Vorgang für andere Felder wiederholen. *Tipp! Beim Sprechen sollte der Abstand zum Mikrophon 15 bis 20 cm betragen, um einen lauten, deutlichen Ton zu erzielen.*



c) Den Aufnahme-Modus beenden
Den RECORD-Knopf drücken und loslassen. Daraufhin erlöschen die Lampen. Hinweis: Nach 20 Sekunden Inaktivität wird der Aufnahme-Modus automatisch beendet.

Schritt 4 – Wiedergabe einer Sprachmitteilung

Eine Sprachmitteilung wiedergeben


Das gewünschte Feld drücken, um eine Sprachmitteilung wiederzugeben.



Hinweis: Durch Drücken eines anderen Felds wird die aktuelle Sprachmitteilung abgebrochen.

Die Lautstärke einstellen

Durch Drücken der grauen Pfeiltasten kann die Lautstärke eingestellt werden.

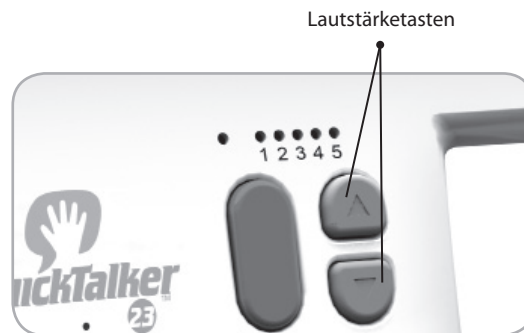

Sprachmitteilungs- und Lampenfunktion

Beim Drücken eines Felds blinkt die Record-Lampe gelb, wenn das Feld leer ist, und rot, wenn eine Mitteilung aufgenommen wird.

Garantie und Pflege

Reinigung und Pflege

Zum Reinigen das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Garantie

Die von AbleNet gefertigten Produkte sind durch eine zweijährige beschränkte Garantie gedeckt. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Der Volltext der Garantie kann auf www.ablenetinc.com eingesehen werden.

Weitere Informationen

Informationen zur Gewährleistung, Garantie und Rücksendung/Reparatur können online eingesehen werden.

Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen oder für eine Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an:

AbleNet, Inc.

Mpls./Saint Paul, MN 55113

800-322-0956

www.ablenetinc.com

Löschen der Sprachmitteilungen

Einzelnes Feld – In den Aufnahme-Modus umschalten und das Feld nur kurz drücken und loslassen.

Ebene – Den RECORD-Knopf 10 Sekunden gedrückt halten, woraufhin alle Sprachmitteilungen auf der aktuellen Ebene gelöscht werden. Die Kernmitteilungen bleiben erhalten.

Löschen aller Mitteilungen – Den RECORD-Knopf 30 Sekunden gedrückt halten, woraufhin ALLE QuickTalker Sprachmitteilungen gelöscht werden.

Record-Knopf



Erweiterte Funktionsmerkmale

Kernmitteilungen

Es gibt drei Kernmitteilungen, die für alle Ebenen gleich sind. Es werden die zuletzt aufgezeichneten Sprachmitteilungen abgespielt.

Sperren der Bedienfelder (RECORD und EBENE)

Die RECORD- und EBENEN-Knöpfe gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt halten. Daraufhin blinken alle Lampen zweimal. Diesen Vorgang wiederholen, um die Bedienfelder freizugeben.

Record-Knopf



Ebenen-Anzeigen




Guía de inicio rápido
 QuickTalker™ 7
 QuickTalker™ 12
 QuickTalker™ 23



www.ablenetinc.com

Características clave

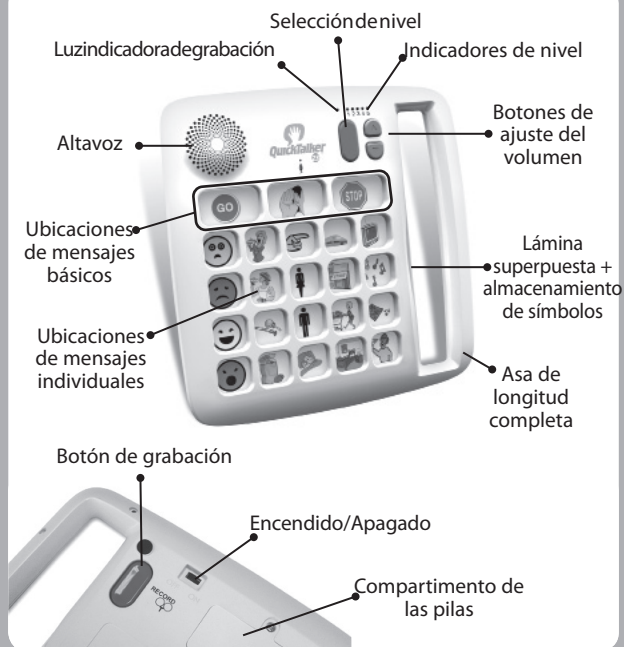

Paso 1: Encendido del QuickTalker™

Encendido del QuickTalker™


Dele la vuelta al dispositivo de manera que la parte trasera quede hacia arriba. Inserte cuatro pilas AA en el dispositivo, en el lugar indicado en la figura. Encienda el dispositivo con el botón de encendido.



Paso 2: Selección del nivel

Selección del nivel


Seleccione el NIVEL (1-5) pulsando el botón rojo de la parte delantera del dispositivo.

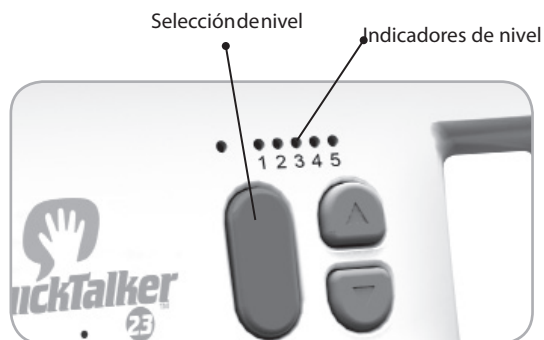

Paso 3: Grabación de mensajes

a) Ingreso de la modalidad de grabación

Pulse sin soltar el botón de GRABACIÓN (RECORD) de la parte trasera del dispositivo hasta que se encienda la luz roja, y a continuación suéltelo.

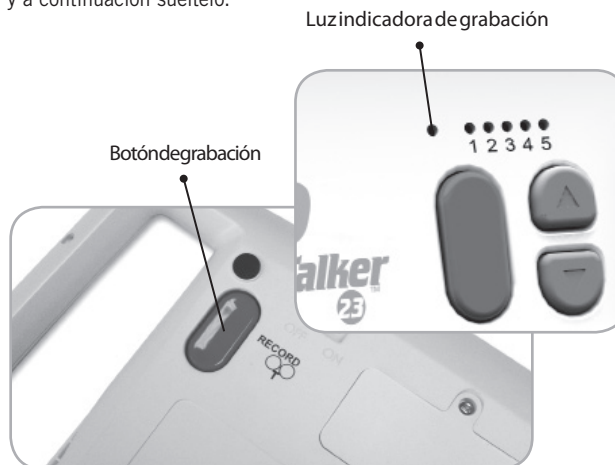

b) Grabación de mensajes

Pulse sin soltar el botón correspondiente a la ubicación deseada del mensaje, comience a hablar después del pitido y a continuación suelte el botón. Repita el procedimiento para las demás ubicaciones.

¡Recomendación! Para obtener un sonido alto y claro, hable desde una distancia de 15 a 20 cm del micrófono.



c) Salida de la modalidad de grabación

Pulse y suelte el botón de GRABACIÓN. Las luces se apagan. Nota: El dispositivo saldrá automáticamente de la modalidad de grabación después de 20 segundos de inactividad.

Paso 4: Reproducción de mensajes

Reproducción de mensajes

Pulse el botón correspondiente a la ubicación deseada para reproducir un mensaje.




Nota: Al pulsar el botón de otra ubicación, cesará la reproducción del mensaje actual.

Ajuste del volumen

Pulse los botones grises de flecha para ajustar el volumen.

Botones de ajuste del volumen

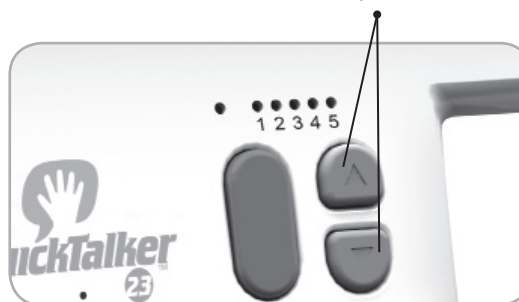

Función de luz y mensaje

Si se pulsa el botón correspondiente a una ubicación, la luz amarilla se encenderá intermitentemente en el caso de que la ubicación esté vacía; se encenderá la luz roja en el caso de que contenga una grabación.

Borrado de mensajes

Ubicación única: Ingrese la modalidad de grabación y a continuación pulse y suelte rápidamente el botón correspondiente a la ubicación.

Nivel: Pulse sin soltar el botón de GRABACIÓN durante 10 segundos para borrar todos los mensajes del nivel actual. Los mensajes básicos se conservarán.

Borrado total: Pulse sin soltar el botón de GRABACIÓN durante 30 segundos para borrar TODOS los mensajes QuickTalker.

Botón de grabación



Características avanzadas

Mensajes básicos

Los tres mensajes básicos serán los mismos en todos los niveles. Se reproducirán los últimos mensajes grabados.

Bloqueo de los controles (GRABACIÓN Y NIVEL)

Pulse sin soltar los botones rojos de GRABACIÓN y NIVEL simultáneamente durante cinco segundos. Todas las luces se iluminarán dos veces. Repita el procedimiento para desbloquear los controles.

Botón de grabación

Indicadores de nivel



Información sobre la garantía y los cuidados

Limpieza y cuidados

Para limpiarlo, pase un paño ligeramente humedecido sobre su superficie.

Garantía

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía los cubre contra defectos de materiales y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía está disponible en www.ablenetinc.com.

Más información

En esta página web podrá encontrar la garantía y la información referente a devoluciones y reparaciones.

Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

AbleNet, Inc.

Mpls./Saint Paul, MN 55113

800-322-0956

www.ablenetinc.com